

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Administración Intravenosa Por Gravedad Mini Bag Plus De 10 Gotas Por Minuto

**Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso de emergencia, llame al 911.**

### INSUMOS:


- Bolsa de medicación intravenosa con vial de medicación conectado
- Tubo intravenoso (**el tubo se debe cambiar DIARIAMENTE**)
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- (1) Tapa de protección azul claro
- Portasueros IV

### PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina \_\_\_ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina \_\_\_ ml
- H** Heparina \_\_\_ ml (si es necesario)

### PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Consulte la etiqueta para ver su nombre, el nombre del fármaco, la frecuencia y la fecha de vencimiento. Inspeccione la bolsa con la medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Póngase en contacto con nosotros si hay discrepancias o preocupaciones.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
4. Prepare la medicación como se indica:

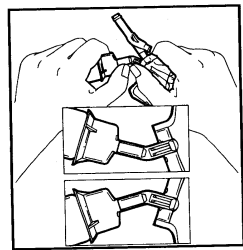


# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Administración Intravenosa Por Gravedad Mini Bag Plus De 10 Gotas Por Minuto


### Paso 1:

Exprima la bolsa y revise el vial en busca de pérdidas en el sistema. Utilice únicamente si el vial está completamente sellado y seco. Doble hacia arriba y luego hacia abajo para romper el sello.

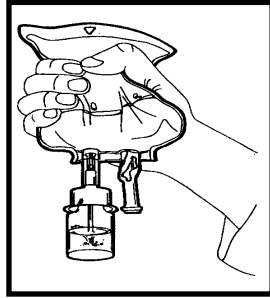

### Paso 2:

Sostenga la bolsa con el vial hacia abajo. Exprima la solución en el vial hasta que esté lleno hasta la mitad. Sacuda la bolsa para suspender el fármaco en la solución.

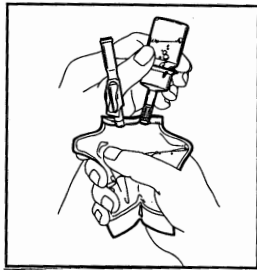

### Paso 3:

Sostenga la bolsa con el vial hacia abajo. Exprima la bolsa para hacer entrar aire al vial. Suelte para drenar el fármaco suspendido en el vial. Repita estos pasos hasta que el vial esté vacío de fármaco y la solución esté bien mezclada. **\*\*NO retire el vial del fármaco de la bolsa\*\***.

5. Retire el tubo de gravedad con el filtro en línea del empaque. Cierre la pinza con rodillo.
6. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
7. Retire la cubierta de la espiga en el tubo e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Administración Intravenosa Por Gravedad Mini Bag Plus De 10 Gotas Por Minuto

8. Cuelgue la bolsa de medicación en el portasueros. Exprima la cámara de goteo para llenarla hasta la mitad.
9. Abra lentamente la pinza de rodillo e invierta el filtro hasta que el tubo se llene de líquido completamente para llenar toda la longitud del tubo con medicación. Cuando observe una gota de fluido en el extremo del tubo, cierre la pinza de rodillo.
10. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
11. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
12. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
13. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
14. Retire la tapa del extremo del tubo de gravedad con filtro y conéctelo a la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso presionando y girando hacia la derecha para asegurarlo en su lugar. **\*\*Tenga cuidado para evitar tocar la punta del tubo\*\***.
15. Administre el medicamento de acuerdo con su Plan de Tratamiento. Para calcular la tasa de flujo, abra ligeramente la pinza de rodillo y cuente la cantidad de gotas en un minuto. **\*Nota: Consulte la Tabla de conversión en la página de atrás para calcular cuántas gotas por minuto.**

### **AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:**

16. Cuando la bolsa de medicación se vacíe, cierre la pinza de rodillo y desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
17. Si debe administrar otra dosis de la medicación el **mismo** día, coloque una tapa estéril azul claro en el extremo del tubo para mantenerla estéril. (**\*\*Vea la siguiente nota**).
18. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Administración Intravenosa Por Gravedad Mini Bag Plus De 10 Gotas Por Minuto

19. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
20. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

**Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 21 a 23; de lo contrario, omita.**

21. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
22. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
23. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
24. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
25. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.**

**NOTA: El tubo de gravedad debe cambiarse DIARIAMENTE. Cuando administre más de una infusión por día, debe conectar una nueva bolsa de medicación para reutilizar el tubo.**



La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica, llame al 911 inmediatamente.

Copyright© 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.