

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Uso De La Válvula Farrell

7-01-042

Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso de emergencia, llame al 911.

INSUMOS:

- Bolsa Farrell
- Bolsa de alimentación
- Jeringa con punta para catéter de 60 cc
- Portasueros IV
- Dispositivo de infusión (si se pidió)

PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Cuelgue la bolsa de alimentación y la bolsa Farrell en el mismo portasuero intravenoso a la misma altura.
3. Cierre la pinza blanca sobre el puerto en Y Farrell.
4. Introduzca el conector del conjunto de administración de la bomba enteral en el puerto en Y en la línea Farrell.
5. Llene la bolsa de alimentación con fórmula y llene el tubo continuando más allá del puerto en Y Farrell hasta el extremo.
6. Descomprima manualmente el estómago del paciente con una jeringa de 60 cc antes de conectar la línea Farrell en el tubo de alimentación.
7. Introduzca el extremo del conector del tubo de la bolsa Farrell en la sonda de alimentación.
8. Abra la pinza blanca y la pinza azul en la línea Farrell.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE RECORDAR


- La válvula Farrell puede usarse con cualquier tipo de sistema de suministro enteral, incluidas las bombas de alimentación, por gravedad o alimentación con método de bolo.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Uso De La Válvula Farrell

- Asegúrese de que el puerto en Y Farrell se encuentre en o por debajo del ombligo del paciente.
- Cambie la bolsa Farrell a diario.
- Cuando la línea Farrell está abierta, la alarma de “OCLUSIÓN” de la bomba no funcionará, ya que la fórmula seguirá fluyendo hacia la bolsa Farrell (vea los consejos en la hoja de diagrama).

Farrell Valve & Super Farrell Valve

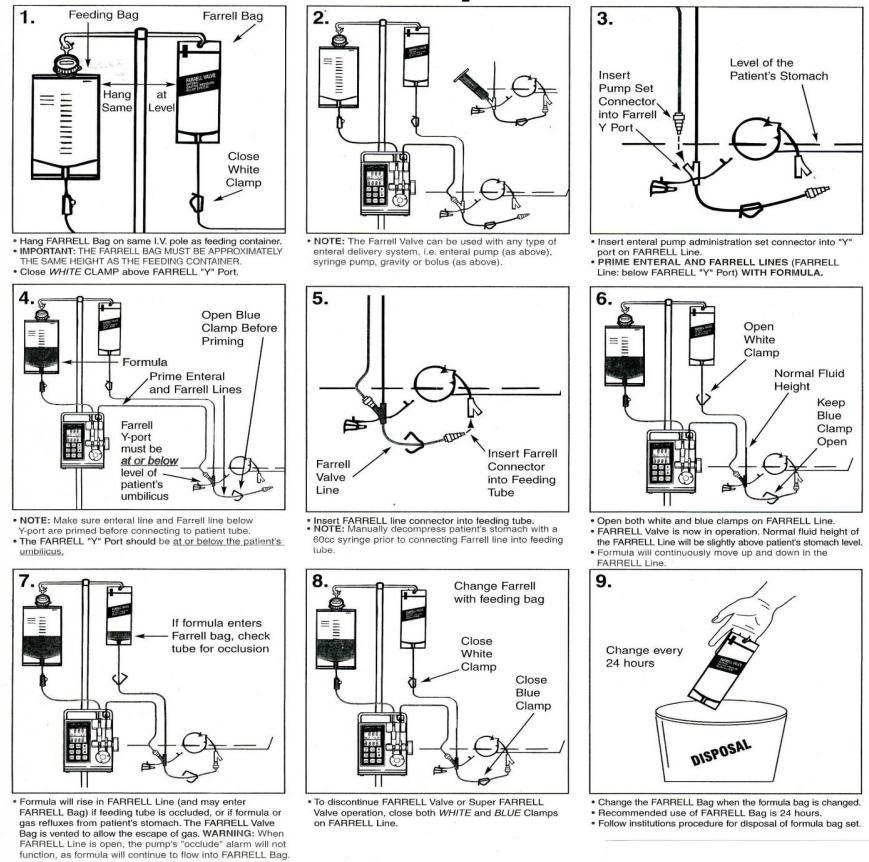

CAREPATHrx

La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica, llame al 911 inmediatamente.

Copyright © 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.