

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Uso De Una Jeringa Para El Venteo Del Tubo G

7-01-043

Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso de emergencia, llame al 911.



INSUMOS:

- Jeringa de 60 ml
- Conector en "Y"

PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Coloque un conector en "Y" en el tubo de alimentación.
3. Coloque el tubo de la bolsa de alimentación en un lado de la "Y".
4. Coloque una jeringa con punta para catéter de 60 ml (sin el émbolo) en el otro lado de la Y. La jeringa de venteo se debe mantener elevada 4 – 6 pulgadas por encima del estómago para evitar el efecto sifón. Envuelva la parte superior de la jeringa con cinta dejando suficiente cinta para hacer una lengüeta que puede sujetarse a la ropa de los bebés o colgarse de la barandilla de la cuna.

A algunos pacientes se les indicará permanecer venteados en todo momento, mientras que otros pueden ventearse únicamente después de la alimentación y luego permanecer cerrados con la pinza. Siga las indicaciones proporcionadas por su médico.

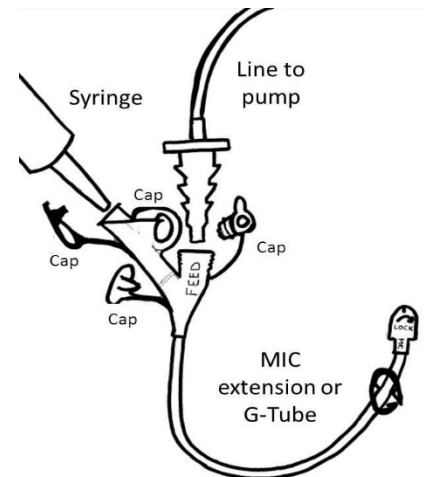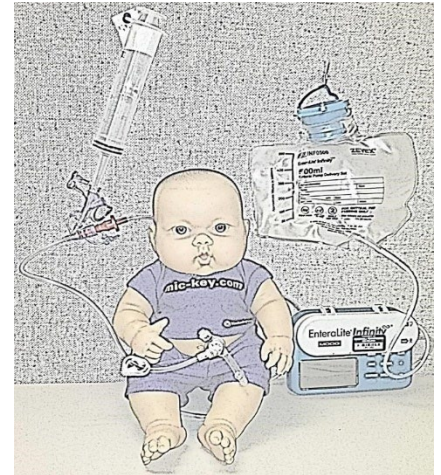

CAREPATHrx

La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica, llame al 911 inmediatamente.

Copyright © 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.